

EN Handheld Nebulizer

ES Nebulizador portátil

DE Handlicher Vernebler

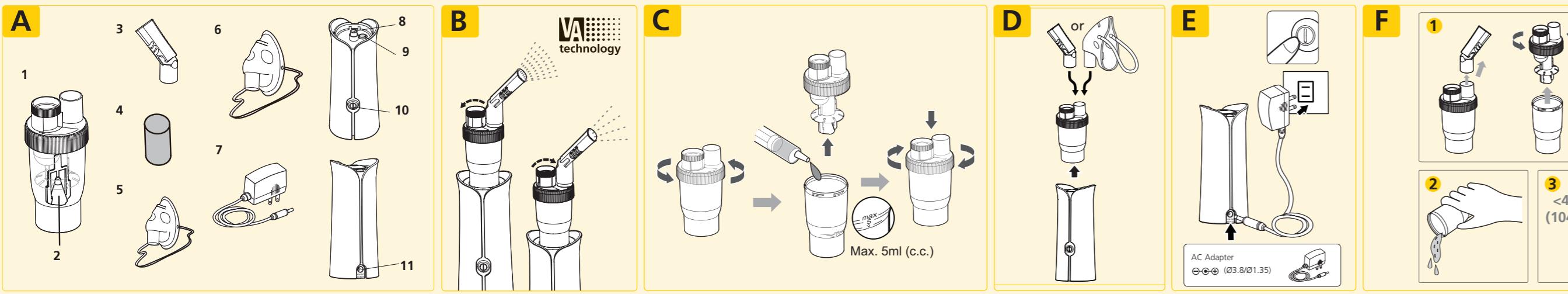
FR Nébuliseur portable

RU Портативный ингалятор

PL Poręczny inhalator

AR رذاذة يدوية

FA نبوليزر دستي

**RU Русский Язык**

Введение
Ваш компрессорный ингалятор должен использоваться под руководством квалифицированного врача и / или специалиста по обслуживанию аппаратов искусственной вентиляции легких. Благодаря Вам за покупку компрессорного ингалятора NH60. При надлежащем уходе и использовании Ваш ингалятор обеспечит Вам наилучшее лечение на протяжении многих лет. Данное устройство работает от электросети. Лечебная процедура осуществляется быстро, безопасно и удобно. Данное устройство идеально подходит для всех возрастов.

Вам необходимо прочитать это руководство, чтобы узнать об особенностях ингалятора. Вместе со своим врачом и / или медицинским специалистом, вы можете чувствовать себя комфортно и уверенно, зная, что вы получаете наиболее эффективный метод ингаляционного лечения дыхательных путей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш ингалятор предназначен для лечения астмы, ХОБЛ и других респираторных заболеваний, где во время лечения требуется применение аэрозольных лекарств. Пожалуйста, проинформируйтесь с Вашим лекарством, чтобы определить, разрешены ли применения Вашего лекарства для данного ингалятора. Проверьте тип, дозу и время лечения перед использованием ингалятора.

Данный прибор соответствует требованиям директивы EC 93/42/EEC (Директива по медицинским приборам) и европейского стандарта EN 13544-1:2007+A1:2009 Оборудование реабилитации - часть 1: Ингаляторные системы и их компоненты.

Прежде чем использовать данный прибор, внимательно прочтите инструкцию и следуйте ей неукоснительно.

Внимание: Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при использовании ингалятора. Это устройство должно использоваться только по его прямому назначению, как описано в разделе "Инструкции и рекомендации".

Предостережения при пользовании изделием:
• Не извлекайте из прибора воду.
• Не используйте в течение времени, когда прибор находится в положении "OFF".
• Не прикасайтесь к ингалятору, если он упал в воду - сразу же отключите питание.

• Не используйте прибор, напичканный пылью и/или водой.
• Прибор не должен использоваться только в включном состоянии.

• Не на jakiemyt' woda w czasie użycia, a także nie używać urządzenia do mycia twarzy i głowy.

• Не использовать прибор в виде насосa.

• Не использовать прибор в виде насosa.

• Не использовать прибор в виде насосa.

